



Näytteenotto

metsästetyistä villisioista ASF-tutkimuksiin

Villisiaista otetaan virustutkimuksiin näytteeksi


- munuainen, perna ja verta

Lisäksi

- emakoilta 5 - 10 cm pala kohdunsarvea
- karjuilta kivekset

Munuaiset

Munuaiset sijaitsevat ruhon keskiosassa vatsaontelon selkäpuolella, molemmin puolin selkärankaa. Toinen munuainen riittää näytteeksi.

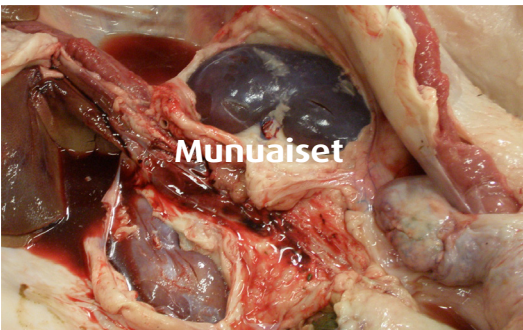

Perna

Perna on pitkänomainen, melko litteä, väriltään tummanpunainen elin, joka on kiinnittynyt mahalaukun kylkeen ruhon vasemmalla puolella.


Verinäyte

Verinäytteeseen ei oteta hyytymiä, muita kudospaloja tai roskia. Verinäyte otetaan ensisijaisesti pienellä kertakäyttöruiskulla sydäimestä, mutta verinäytteen voi ottaa myös rintaontelosta, jos siellä on tuoretta verta näytettä otettaessa.




Kohtu

Kohtu on kooltaan vaihteleva Y:n muotoinen elin, jonka runko-osa on peräsuolen ja virtsarakon välissä. Runko-osa haarautuvat oikea ja vasen kohdunsarvi. Naaraan koko, ikä sekä mahdolliset tiineydet vaikuttavat kohdun kokoon. (Kohtunäytteen lähettäminen on edellytys naaraspalkkion maksamiselle.)

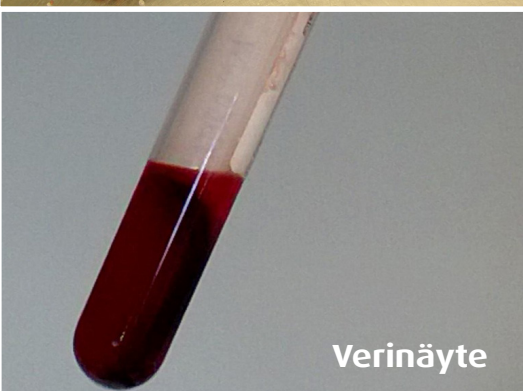

Kivekset

Karjuilta lähetetään näytteeksi kivekset.

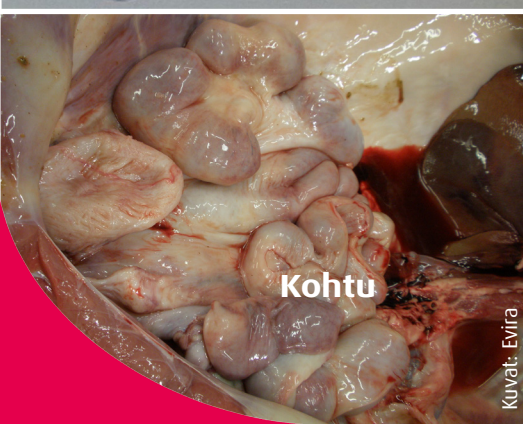

Noudata suolistamisen ja nylkemisen yhteydessä hyvää hygieniää, käytä kertakäyttöhansikkaita ja pese kädet lopuksi hyvin.

Näytteenottotarvikkeet

Elin- ja lihasnäytteet pakataan muovipusseihin, mutta verinäyte pitää ottaa erityiseen verinäyteputkeen. Jos verinäyteputkia ei ole saatavilla, otetaan pelkät elinnäytteet muovipusseihin. Näytteenottovälineitä voi tilata Evirasta osoitteesta tilaukset@evira.fi. Näytteenottovälineitä on toimitettu alueellisiin riistakeskuksiin. Verinäyteputkia voi kiiretilanteessa pyytää myös paikalliselta kunnaneläinlääkäriltä.

Perusohjeet näytteenottoon:

- Ota näytteet mahdollisimman pian eläimen kuoleman jälkeen.
- Pakkaa munuainen ja perna samaan pakkaukseen ja kohtu/kivekset sekä verinäyteputki omiin pakkauksiinsa; kahteen päällekkäiseen muovipussiin.
- Jäähdytä pakkaukset noin jääkaappilämpötilaan ennen lähettämistä.
- Kääri pussit sanomalehti-, talous- tai muuhun imevään paperiin ja sen jälkeen vielä yhteen muovipussiin.
- Laita muovipussi kuljetusta kestäväään pussiin tai laatikkoon, johon laitetaan mukaan täytetty lähete ja palkkiolomake.
- Jos lähetät samassa paketissa näytteitä useasta eläimestä, merkitse yhden eläimen näytepussit ja vastaava lähete samalla numerolla.
- Lähetä näytteet Eviraan Helsinkiin Matkahuollon mukana heti pyyntiä seuraavana arkipäivänä. Näytteiden viimeinen lähetyspäivä on torstai. Säilytä perjantaina otetut näytteet kylmässä viikonlopun yli ja lähetä ne maanantaina.
- Osoite: EVIRA, VIROLOGIA, MUSTIALANKATU 3, 00790 HELSINKI
- Evira maksaa Matkahuollon lähetyskulut, näytteet lähetetään Matkahuollon normaalina rahtina (vastaanottaja maksaa)
- Jos lähetät näytteitä trikiinitutkimukseen, laita trikiininäytteet omaan pakkaukseensa, kahteen päällekkäiseen muovipussiin ja pakkaa kuten elinnäytteet. Lähetä näytteet trikiininäytteitä tutkivaan laboratorioon tai virusnäytteiden mukana Eviraan*.

Lähete

Lähetteen voi kirjoittaa myös vapaamuotoisesti, kunhan kaikki tarvittavat tiedot (lähettäjän yhteystiedot ja villisian pyyntipaikka) tulevat mukaan. Lähetteeseen on tärkeä kirjata, jos villisillä on havaittu sairauden oireita.

Näytteet trikiinitutkimuksiin

- Näytteeksi otetaan lihasnäyte etujalan lihaksista, kielestä ja/tai palleasta.
- Näytettä tarvitaan vähintään 10 g, mielellään jopa 50g.
- Lihasnäyte otetaan niin, että siinä ei ole mukana rasvakudosta, jännettä eikä kielen pintakerrosta. Palleanäyte otetaan pallean lihaksikkaasta osasta.



*Evira maksaa metsästäjille palkkiona 40 euroa/yhdestä villisiasta lähetetyt näytteet. Vaihtoehtona rahakorvaukselle metsästäjä voi lähettää trikiininäytteet tutkittavaksi Eviraan korvauksetta. Tällöin trikiinituloksen saa kahden viikon kuluessa. Naarasvillisiosta maksetaan lisäpalkkiota 60 euroa, kohtunäytteen on oltava mukana näytelähetyksessä. Kuolleenä löydettyistä tai oireilevista villisioista ilmoittamisesta Evira maksaa palkkiona 100 euroa/villisika.

Ajankohtaista tietoa näytteenotto-ohjeista, palkkioista, trikiinitutkimuksista ja lähete:

www.evira.fi > Eläimet > Eläinten terveys ja eläintaudit > Näytteenotto- ja lähetysohjeet > Villisika

Laboratoriot, jotka Evira on hyväksynyt tekemään trikiinitutkimuksia:

www.evira.fi > Tietoa Evirasta > Esittely > Toiminta > Laboratoriot > Eviran hyväksymät laboratoriot > Hyväksytyt laboratoriot > Trikiinitutkimukset